

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость вращения: ~3000 оборотов/мин.

Напряжение: 220 В

Мощность: 20 Вт

Частота: 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Вибромассажёр - 1шт.
2. Инструкция - 1шт.

Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайтах:
www.tz66.ru www.t-zdor.ru технологии-здоровья.рф

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

г. Екатеринбург
ИП Федоров А.А.
ул. Первомайская, 69
Тел. +7 (343) 368-18-00

г. Москва
ООО «Технологии здоровья»
3-ий Нижнелихоборский проезд, 1
Тел. +7 (495) 792-51-50

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку вибромассажёра BM-HT045. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной.

Вибромассажёр с функцией инфракрасного прогрева BM-HT045 обеспечивает эффективный массаж, устойчивый терапевтический эффект, снимает тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Массажные головки/ инфракрасные излучатели
2. Переключатель
3. Ручка
4. Сетевой шнур



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте вилку прибора в розетку.
2. Передвиньте переключатель из положения «OFF» (выкл.) в положение «LOW» (низкая интенсивность), вибромассажёр начнёт работать. Приложите массажёр к нужному участку и приступайте к массажу. Дополнительно к массажу вы получите сеанс инфракрасной терапии.
3. Для увеличения интенсивности массажа передвиньте переключатель в положение «HIGH» (высокая интенсивность).

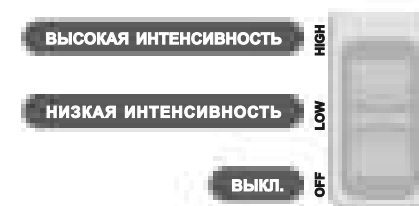



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

НАЧИНАЙТЕ МАССАЖ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ (РЕЖИМ «LOW»)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 15 МИНУТ

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОДНУ ЧАСТЬ ТЕЛА — 4 МИНУТЫ

МАССАЖ МОЖНО ПРОВОДИТЬ НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА КРОМЕ ГОЛОВЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПИТЬ 150 МЛ ВОДЫ ДО МАССАЖА И 250 МЛ ВОДЫ ПОСЛЕ СЕАНСА МАССАЖА

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАССАЖЁР МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ, А ТАКЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ

4. По окончании процедуры массажа передвиньте переключатель в положение «OFF» (выкл.) для выключения прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажёр при плохом самочувствии.
2. Выберите удобное положение тела, вам должно быть комфортно (неудобный массаж может навредить).
3. Не рекомендуется использовать массажёр беременным женщинам; людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким/низким давлением, сердечной или почечной недостаточностью; детям.
4. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, **пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.**

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C.
2. Храните массажёр вдали от воды, не допускайте попадание на массажёр воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. Беречь от огня.
3. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
4. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
5. Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после его эксплуатации, а также перед чисткой.
6. Храните массажёр в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Однако компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.
4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Вибромассажёр с функцией инфракрасного прогрева
Модель	BM-HT045
Дата продажи	«___» _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя