

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Массажная подушка - 1шт.

Батарейки - 2шт.

Инструкция - 1шт.

Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайтах:

www.tz66.ru www.t-zdor.ru технологии-здоровья.рф

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

г. Екатеринбург
ИП Федоров А.А.
ул. Первомайская, 69
Тел. +7 (343) 374-18-00

г. Москва
МО, Дмитровский р-н
п. Деденево, Московское шоссе, д.1
Тел. +7 (495) 792-51-50

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку массажной подушки BM-HT030. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной. Массажная подушка BM-HT030 предназначена для массажа различных частей тела, однако наиболее эффективна для массажа шеи и воротниковой зоны.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


1. Работает от 2х батареек типа AA, 1,5V.
2. 6 режимов массажа:
 - 1) Непрерывный мягкий массаж;
 - 2) Непрерывный интенсивный массаж;
 - 3) Интенсивный прерывистый массаж (более 70 перерывов в мин.);
 - 4) Переменное чередование мягкого и интенсивного массажа;
 - 5) Переменное чередование режимов 1, 2, 3, 4 (каждый длительностью ~ 3 сек.);
 - 6) Переменное чередование режимов 1, 2, 3, 4, 5 (каждый длительностью ~ 45 сек.);
3. Автоматическое отключение через 20 минут.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Храните подушку в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
2. Не используйте её при высокой температуре и избыточной влажности окружающей среды.
3. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
4. Если подушка не используется длительное время, выньте из неё батарейки.
5. Крышка отсека для батареек должна быть плотно закрыта.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Нажмите кнопку **ON/OFF** (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать массаж.
2. Выберите необходимый режим, нажимая на кнопку **MODE** (РЕЖИМ).
3. Для завершения массажа нажмите кнопку **ON/OFF**.

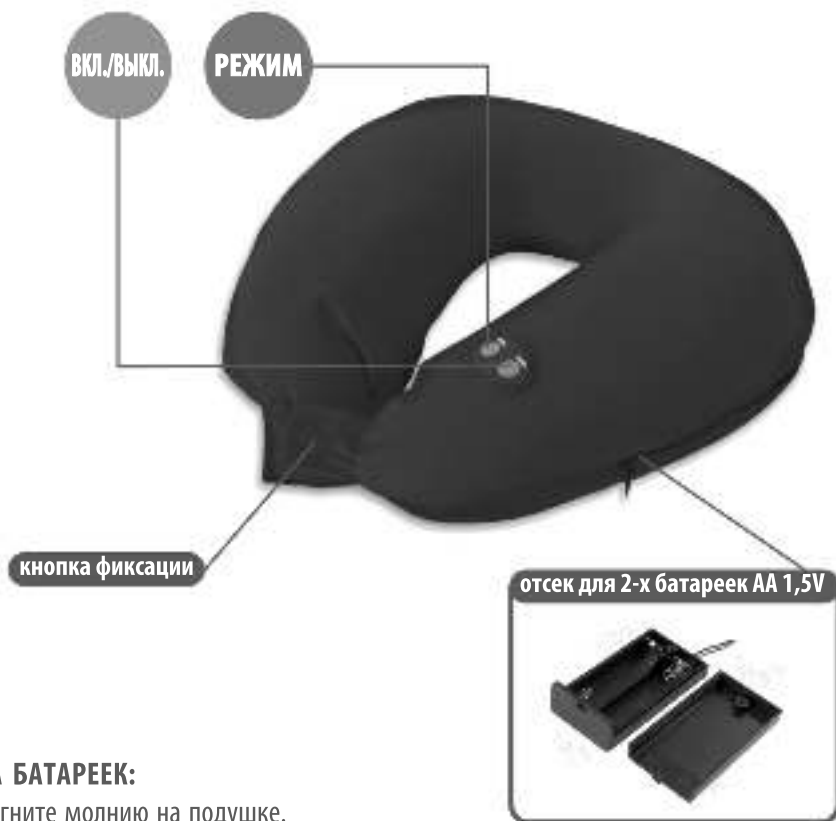

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

1. Расстегните молнию на подушке.
2. Аккуратно выньте специальный отсек для батареек.
3. Лёгким нажатием переместите крышку отсека для батареек в направлении, указанном стрелкой.
4. Вставьте 2 батарейки типа AA, 1,5V в специальный отсек.
5. Плотно закройте крышку отсека.
6. Поместите отсек для батареек обратно в подушку и застегните молнию.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. При обнаружении дефектов, возникших по вине производителя, в течение гарантийного срока прибор подлежит гарантийному ремонту (срок которого не может превышать 45 рабочих дней). Однако компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца.

Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.

2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.

3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.

4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Массажная подушка "Воротник"
Модель	ВМ-НТО30
Дата продажи	« ___ » _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя _____